

Nitrate LR TT

M267

0.5 - 14 mg/L N

2,6-Diméthylphénole

### Informations spécifiques à l'instrument

Le test peut être effectué sur les appareils suivants. De plus, la cuvette requise et la plage d'absorption du photomètre sont indiquées.

Appareils	Cuvette	$\lambda$	Gamme de mesure
SpectroDirect, XD 7000, XD 7500	ø 16 mm	340 nm	0.5 - 14 mg/L N

### Matériel


Matériel requis (partiellement optionnel):

Réactifs	Pack contenant	Code
Nitrate DMP LR / 25	25 Pièces	2423340

### Liste d'applications

- Traitement des eaux usées
- Traitement de l'eau potable
- Traitement de l'eau brute




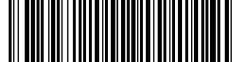


## Réalisation de la quantification Nitrate LR avec test à cuve

Sélectionnez la méthode sur l'appareil.


Pour cette méthode, il n'est pas nécessaire d'effectuer une mesure ZERO à chaque fois sur les appareils suivants : XD 7000, XD 7500

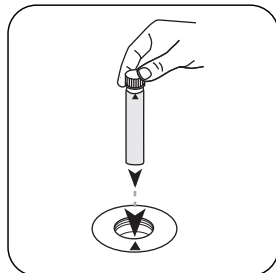

Placez la **cuvette du blanc** dans la chambre de mesure. Attention à la positionner correctement.

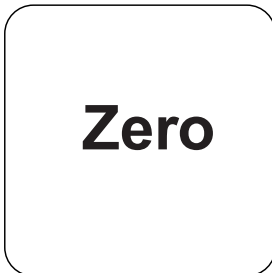


Appuyez sur la touche **ZERO**.

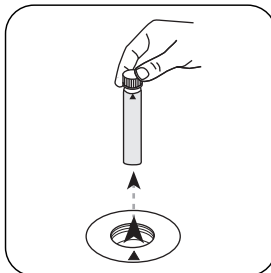


Retirez la **cuvette** de la chambre de mesure.


Sur les appareils ne nécessitant **aucune mesure ZÉRO**, commencez ici.

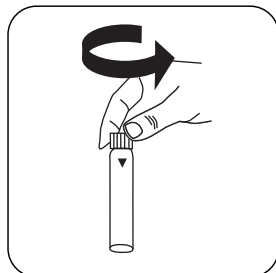


Ouvrez une **cuvette de réactif**.

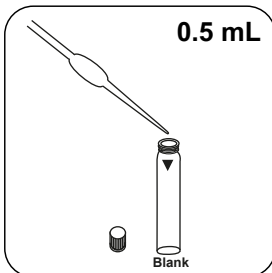


Versez **0.5 mL d'échantillon** dans la cuvette.

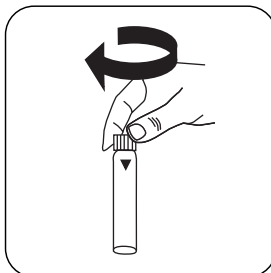


Fermez la(les) cuvette(s).

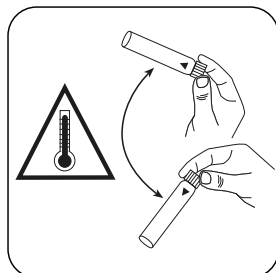


Mélangez soigneusement le contenu en mettant prudemment le tube à l'envers puis à l'endroit. **Attention : Développement de chaleur !**

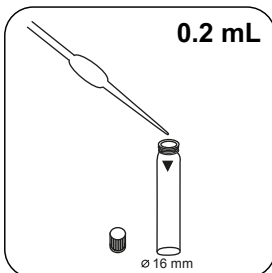


Ajoutez **0.2 mL de Nitrate-111**.

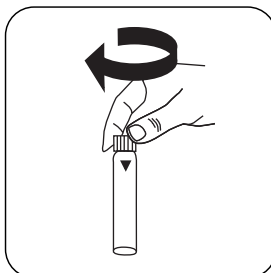

Fermez la(les) cuvette(s).

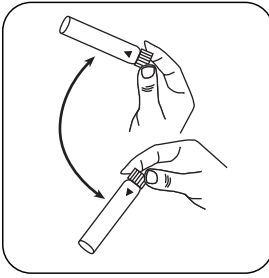


Mélangez le contenu en mettant le tube plusieurs fois à l'envers puis à l'en-droit.

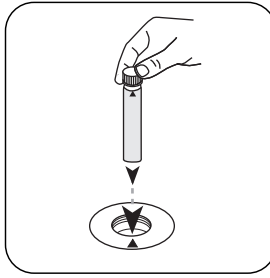

Placez la **cuvette réservée à l'échantillon** dans la chambre de mesure. Attention à la positionner correctement.



Appuyez sur la touche **TEST** (XD: **START**).

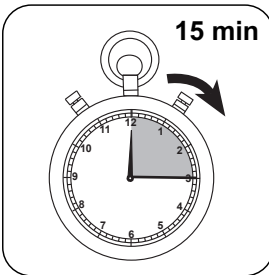

Attendez la fin du **temps de réaction de 15 minute(s)**.

À l'issue du temps de réaction, la mesure est effectuée automatiquement.

Le résultat s'affiche à l'écran en mg/L  $\text{NO}_3\text{-N}$  ou  $\text{NO}_3$ .



## Analyses

Le tableau suivant identifie les valeurs de sortie qui peuvent être converties en d'autres formes de citation.

Unité	Formes de citation	Facteur de conversion
mg/l	N	1
mg/l	NO <sub>3</sub>	4.4268

## Méthode chimique

2,6-Diméthylphénole

## Appendice

### Fonction de calibrage pour les photomètres de tiers

$$\text{Conc.} = a + b \cdot \text{Abs} + c \cdot \text{Abs}^2 + d \cdot \text{Abs}^3 + e \cdot \text{Abs}^4 + f \cdot \text{Abs}^5$$


	ø 16 mm
a	-3.34651 • 10 <sup>-1</sup>
b	2.53157 • 10 <sup>-1</sup>
c	
d	
e	
f	

## Interférences

### Interférences persistantes

1. Les concentrations de nitrite supérieures à 2 mg/L entraînent des résultats plus élevés.
2. Les concentrations élevées de substances oxydables, organiques (CSB) entraînent des résultats plus élevés.

Interférences	de / [mg/L]
Cr <sup>6+</sup>	5
Fe <sup>2+</sup>	50
Sn <sup>2+</sup>	50
Ca <sup>2+</sup>	100



<b>Interférences</b>	<b>de / [mg/L]</b>
Co <sup>2+</sup>	100
Cu <sup>2+</sup>	100
Fe <sup>3+</sup>	100
Ni <sup>2+</sup>	100
Pb <sup>2+</sup>	100
Zn <sup>2+</sup>	100
Cd <sup>2+</sup>	200
K <sup>+</sup>	500
NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>	2
Cl <sup>-</sup>	500

**Bibliographie**

Photometrische Analyseverfahren, Schwedt, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart 1989

**Dérivé de**

ISO 7890-1-2-1986

DIN 38405 D9-2