


Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group

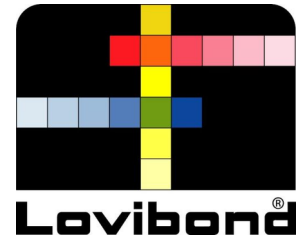

EC 2000 Pt-Co

Farbmessung von Wasser



- Schnell & präzise
- Direkt einsatzfähig
- Garantierte Kompatibilität mit internationalen Standards
- Ergebnisse können durch farblichen Vergleich oder numerisch abgelesen werden

Bestell-Nr.: 162010

2 Möglichkeiten Farbe zu vergleichen

- Farbdarstellung auf dem Bildschirm
- Numerische Anzeige auf dem Bildschirm

Einfacher Übergang von visuellen zu elektronischen Messungen

Einige Anwender, die an die traditionelle Comparator-Serie gewöhnt sind, finden manchmal das Upgrade auf ein elektronisches System entmutigend. Die Gewissheit, sich auf physische Farbunterschiede zu verlassen, wird verringert. Dieser Übergang wurde jetzt leicht gemacht.

Touchscreen Technologie

Die hohe Ergonomie und die intuitive Bedienung mittels Farbtouchscreen unterstützen Anwender und garantieren ihre schnelle Einarbeitung.

Programmierbare Einstellungen

Anwender können Sprache*, Datum und Uhrzeit sowie bevorzugte Anzeigeeinstellungen festlegen und Projekte mit individuellen Toleranzbereichen einrichten.

Farbcodierte Ergebnisanzeige

Die farbcodierte Ergebnisanzeige am Bildschirm bietet dem Anwender sofortige Informationen über die Probe.

- Grün = innerhalb des Toleranzbereichs
- Rot = außerhalb des Toleranzbereichs
- Gelb = an der Grenze des Toleranzbereichs

Hohe Ergonomie und die intuitive Bedienung

Sie werden per Touchscreen geführt. Dies garantiert ihre schnelle Einarbeitung.

Einfache Speicherung und Übertragung von Messwerten

Der große Datenspeicher (> 20.000 Messwerte) und die USB-Schnittstelle gewährleisten eine einfache und sofortige Speicherung und Übertragung von Messwerten.

Messung mit einer Farbskala

Der EC 2000 Pt Co bietet Ihnen eine individuelle Skala zur Messung der Farbe Platinum Cobalt / Hazen / APHA (ASTM D 1209).

* unterstützte Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Japanisch, Russisch.

Industrie

Chemische Industrie | Lebensmittel- und Getränkeindustrie | Ölindustrie | Pharmazeutische Industrie

Applikation

Chemikalien | Mineralöle und Wachse | Pharmazeutische Produkte- und Kosmetik | Speiseöle und -fette

EC 2000 Pt-Co

Die Evolution von der visuellen (subjektiven) zur elektronischen (objektiven) Farbmessung.

Hochpräzise mittels 50 mm Küvetten-Schichttiefe!

Technische Daten

Farb-Durchsichtigkeit	Transparent
Display	Size: 3.5 inch; Resolution: 320 x 240; Colour: 24 Bit (True Colour)
Schnittstellen	USB
interner Speicher	> 20000 messungen
Stromversorgung	USB 2.0 (mini USB Stecker) 4 Batterien (AA)
Tastatur	Tastaturmembrane mit 3 Tasten
Gehäuse	Flammenschutzmittel ABS
Tragbarkeit	Tragbar
Touchscreen	Nein
Sprachen Benutzeroberfläche	Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch
Abmessungen	106 x 57 x 210 mm

Lieferumfang

- Gerät im Koffer
- Netzteil (UK, EU, US)
- USB Kabel
- 4 AA Batterien
- Standard Referenzlösung 1
- Standard Referenzlösung 2
- Glasküvette
- Glasstandard (klar)
- CD mit Software (Windows®)
- Bedienungsanleitung

Zubehör

Titel	Bestell-Nr.
Flüssigstandard Platin-Cobalt-Farbzahl 0 - 500 ml	133991
Flüssigstandard Platin-Cobalt-Farbzahl 15 - 500 ml	134160
Flüssigstandard Platin-Cobalt-Farbzahl 30 - 500 ml	134170
Flüssigstandard Platin-Cobalt-Farbzahl 15 - 60 ml	135049
Flüssigstandard Platin-Cobalt-Farbzahl 0 - 60 ml	135059
USB Netzteil für EC 2000	190620
USB-Kabel 2,0 A - Micro B Stecker	190630
50 mm Plastik Einwegküvetten	352101

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
verkauf@lovibond.com
www.lovibond.com
Deutschland

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Vereinigtes Königreich

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaysia

Tintometer Brasilien

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasilien

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
USA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Indien

Tintometer Spanien

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spanien

Technische Änderungen vorbehalten

Printed in Germany

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies