


# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



### Teste de tubo para Bactérias Redutoras de Sulfito (SRB), caixa com 10 un.

Para a determinação das bactérias redutoras de sulfatos

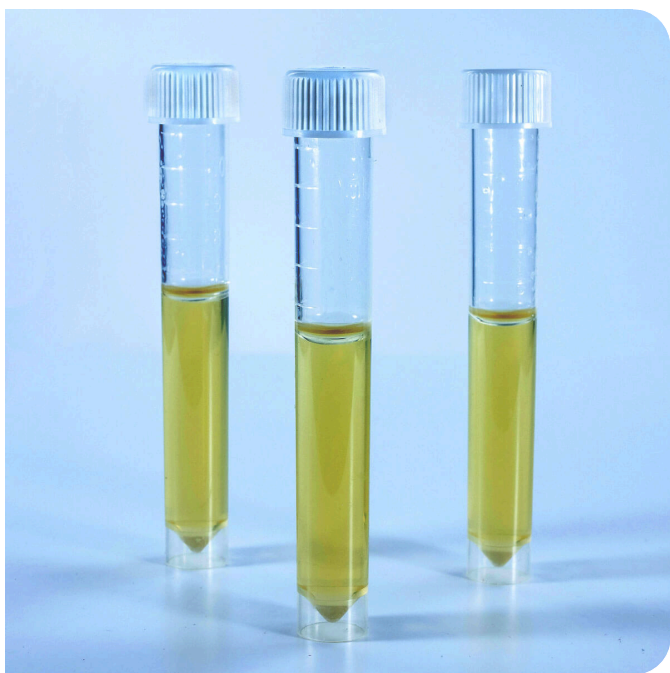

- Acrescentar a amostra com uma pipeta ou zaragatoa
- O meio cor de palha reage à formação de sulfureto de hidrogênio pelas bactérias
- Resultados semi-iquantitativos após 5 dias
- Determinação da contaminação por meio do precipitado negro no ágar

Artigo No: 56B010810

#### Classificar e avaliar os riscos confiavelmente

Os testes em tubos indicam a presença de microrganismos, especialmente em sistemas de água e líquidos, e oferecem um método semiquantitativo de medição. Assim, os riscos microbiológicos podem ser classificados e avaliados de forma confiável na maioria das aplicações, de forma que as medidas corretivas possam ser iniciadas imediatamente.

#### Amostragem e utilização

Tomar 2 ml da amostra líquida com uma pipeta e colocar a amostra num tubo de ensaio. Em seguida, incubar a 35°C até 5 dias com controle diário. Os resultados são determinados pela mudança de cor. Se não houver mudança de cor ou se apenas for visível a formação de bolhas, não há contaminação.

#### Indústria

Eletricidade e Energia | Indústria de Alimentos e Bebidas | Indústria Farmacêutica | Indústria Naval | Indústria Química | Óleo e Gás | Outras Indústrias

#### Teste de tubo para Bactérias Redutoras de Sulfito (SRB), caixa com 10 un.

O teste de tubo é a escolha certa se você quiser detectar bactérias anaeróbias e a corrosão causada por microrganismos. O ágar é um meio semi-sólido para a análise de microrganismos anaeróbios que podem reduzir os sulfatos a sulfito.

#### Acessórios

Título	Artigo No
Comparador Dipslide - App	
Incubadora para Dipslide DI10, capacidade para 12 dipslides	56B000701